

## Derma Pen (polnilni model)

### Specifikacija


1. **Predmet:** Naprava za izvajanje terapije z mikro iglami s pomočjo vibracij.
2. **Delovanje:** Naprava za prebijanje kože za boljšo absorpcijo zdravil ali kozmetike, s pomočjo mikro igel, ki se premikajo med vodeno in umaknjeno pozicijo.
3. **Razvrstitev:**
  - Vrsta zaščite pred električnim udarom: Oprema razreda II
  - Stopnja zaščite pred električnim udarom: Lebdeči del
  - Stopnja zaščite pred vdorom vode: Običajna oprema (IPX0)
  - Način delovanja: Neprekinjeno delovanje
4. **Tehnične specifikacije:**
  - **Ime izdelka:** Električni Derma Pen
  - **Ime modela:** Ni navedeno
  - **Adapter:** 6V - 300mA
  - **Baterija:** 2 litijevi bateriji
  - **Velikost naprave:** 14,7 x 3,1 cm
  - **Velikost darilne škatle:** 18,5 x 15,5 x 5,5 cm
  - **Komplet vsebuje:** 1 Derma Pen + 2 kartuši z iglami

### Sestava kompleta

1. Telo naprave
2. Adapter (110/220V)
3. Kartuše z iglami (opcijsko)

### Ime delov naprave:

- Kartuša z iglami
- Priključek za adapter (za polnjenje)

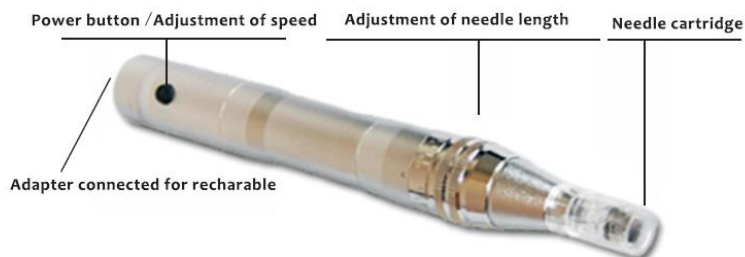

## Kako uporabljati napravo

### 1. Priprava naprave

1. Pred uporabo poskrbite, da je baterija napolnjena vsaj eno uro. Ko adapter zasveti z zeleno lučjo, je baterija popolnoma napolnjena.

### 2. Priprava za uporabo

1. Odprite sterilno embalažo in vzemite kartušo z iglami.
2. Namestite kartušo tako, da zaokrožene utore peresa poravnate z napajalnim modulom ter kartušo potisnete vodoravno do konca.
3. Zaklenite kartušo z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca.
4. Nastavitev dolžine igel izvedite šele po vklopu naprave.
5. Če želite odstraniti kartušo, jo zavrtite v smeri urinega kazalca in potisnite vodoravno navzven.

### 3. Nastavitev hitrosti in dolžine igel

1. Vklop/lzklop in prilagoditev hitrosti
  - Pritisnite gumb za vklop za 2 sekundi, da napravo vklopite. Ob vklopu zasveti rumena luč.
  - Kratki pritisk gumba poveča hitrost gibanja igel. Hitrost lahko preverite glede na utripanje LED svetilke:
    - Svetlo rdeča → Temno rdeča → Vijolična → Modra

### 2. Prilagoditev dolžine igel

#### 1. Nastavitev dolžine igel

Dolžino igel lahko prilagodite z vrtenjem nastavitvenega obroča:

- **V smeri urinega kazalca:** Dolžina igel se poveča.
- **V nasprotni smeri urinega kazalca:** Dolžina igel se skrajša. Dolžino lahko nastavite v razponu od **0,25 mm do 2,00 mm**.

#### Tabela prilagoditve:

- **V nasprotni smeri urinega kazalca:** Dolžina bo krajša.
  - **V smeri urinega kazalca:** Dolžina bo daljša.
2. **Različne dolžine igel zahtevajo različne načine uporabe**
    - **Dolžine 0,25 mm, 0,30 mm, 0,50 mm:** Uporaba z nežnimi krožnimi gibi na koži.
    - **Dolžine 1,00 mm, 1,50 mm, 2,00 mm:** Uporaba na način "žigosanja" (stamp roller), pri čemer nežno žigosate kožo.

## Opozorila

Prosimo, da pred uporabo skrbno preberete navodila in jih upoštevate, kot je opisano.

Ne uporabljajte naprave v naslednjih primerih:

1. Pri osebah, ki imajo akutno bolezen ali krvno bolezen, pri telesni temperaturi nad 38 °C.
2. Pri osebah, ki imajo alergijo ali hemofilijo.
3. Pri osebah z melanotskimi spremembami na obrazu.
4. Pri osebah z visoko notranjo telesno temperaturo.
5. Pri osebah, ki redno obiskujejo bolnišnico.
6. Pri osebah, ki jemljejo zdravila.
7. Pri osebah, mlajših od 12 let.

**Pomembna opozorila:**

- Ne uporabljajte naprave v bližini mest z visoko temperaturo, prahom ali vlago (blizu vlažilcev). To lahko povzroči okvaro naprave.
- Ne popravljajte, razstavlajte ali spreminjajte naprave in telesa naprave (razen če to priporoča naša družba). To lahko povzroči okvaro naprave.
- Ne dotikajte se naprave ali odklopite napajalnega kabla z mokrimi rokami, saj lahko to povzroči električni udar.
- Ne uporabljajte kabla, ki je odtrgan ali podprt. To lahko povzroči požar. (Prepričajte se, da ga zamenjate z novim.)
- Ne uporabljajte kabla, ki ima razpoke ali poškodbe, saj lahko to povzroči poškodbe kože.
- Če naprave ne uporabljate dlje časa, jo izklopite iz električne vtičnice.

**Redno preverjanje:**

- Preverite napravo pred uporabo. Če opazite kakršne koli težave, jo dajte popraviti. Nikoli ne dovolite, da je naprava v uporabi, če ni bila pregledana ali popravljena. Samo operater naprave jo sme dotikati, saj lahko to povzroči nesreče ali okvare naprave.